


# 国内数値版アプリ リニューアル 変更点まとめ

2021年4月20日

住友理工株式会社  
健康介護事業室


ユーザーインターフェイス

## 旧アプリ

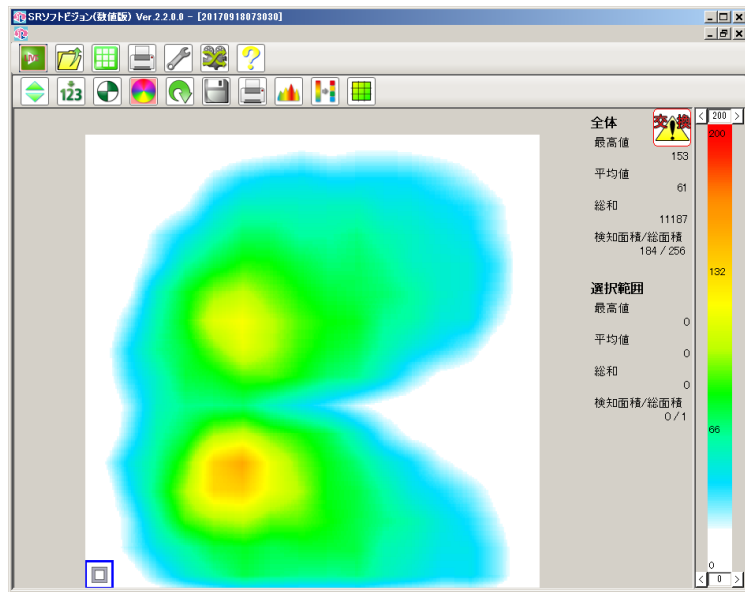

## 新アプリ



### タブ&リボン方式

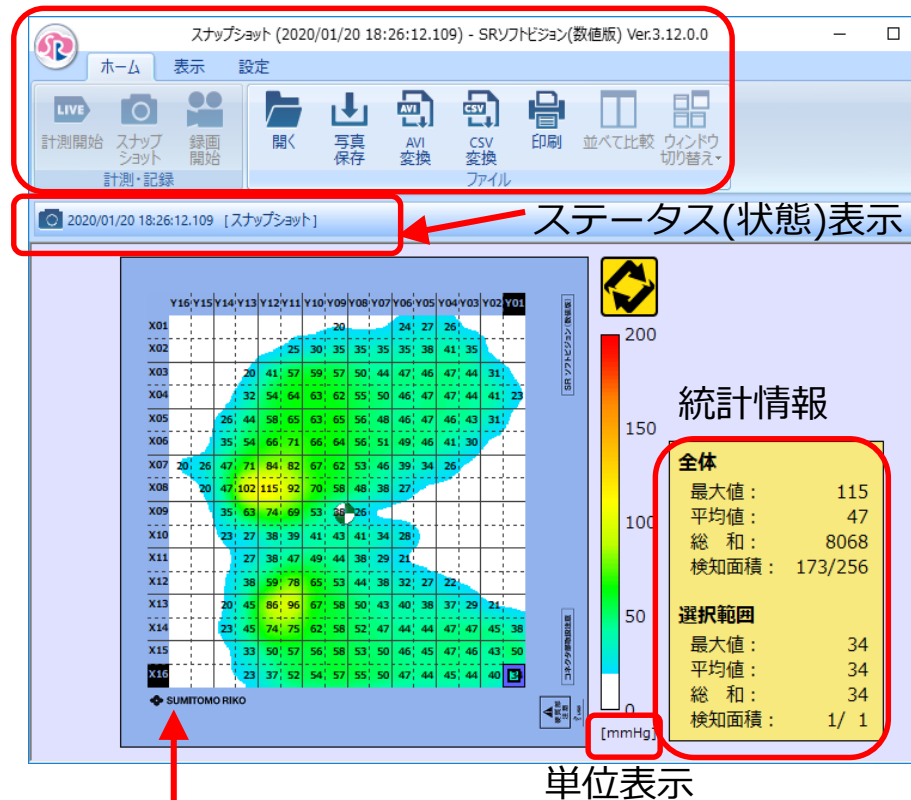

センサ画像の追加 (表示あり/なし選択可)


操作性向上の為、Excelなどと同じ「タブ&リボン方式」を採用しました

	旧アプリ	新アプリ
拡張子	動画 = sv2 静止画 = si2	動画 = sv2a 静止画 = si2a
	バージョンアップに伴い上位互換 ※旧アプリのデータも新アプリで開くことができます	

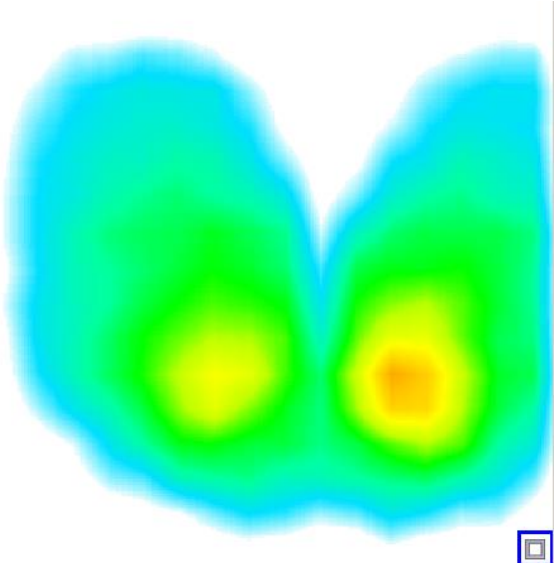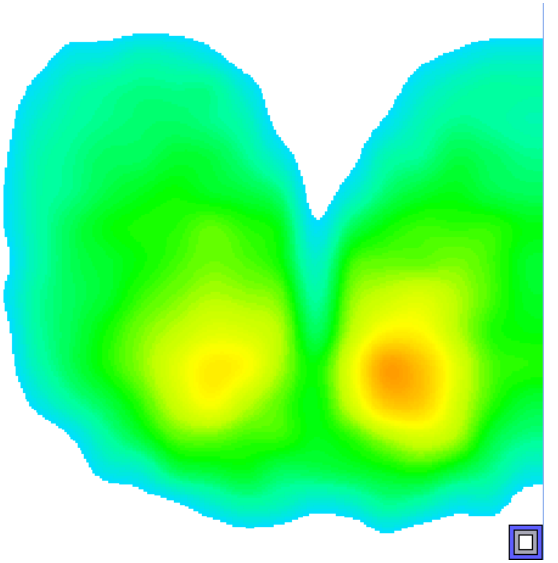	旧アプリ	新アプリ
スムージングの方法	バイリニア補完 	バイキュービック補完 
	スムージング有表示をした際の見え方が少し異なります	

## 旧アプリ


50枚まで(3枚以上は統計値が見にくい)

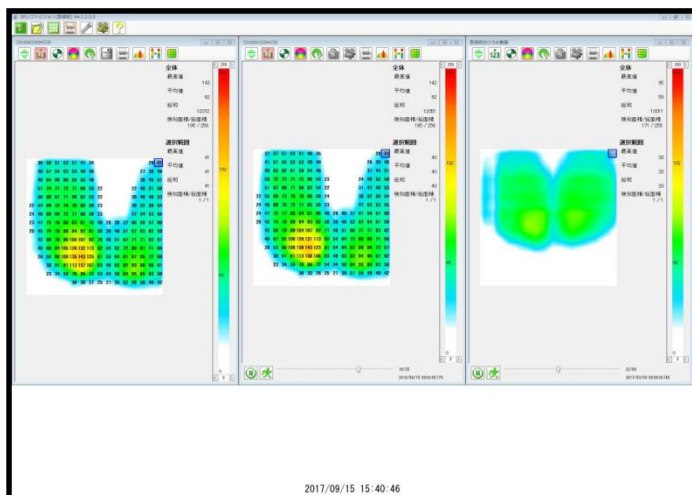

2017/09/15 15:40:46

## 新アプリ

2枚まで

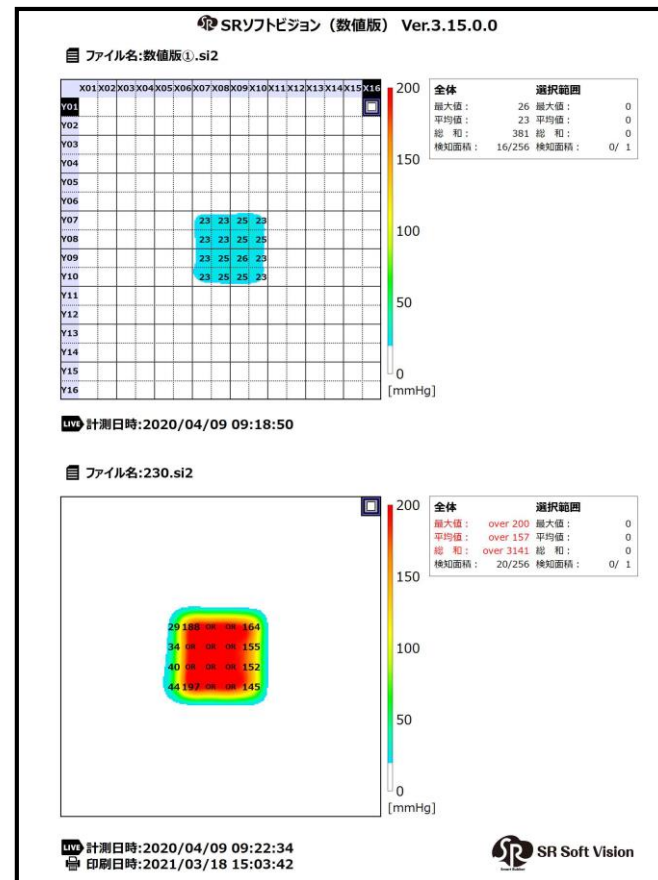


複数印刷

複数印刷を2枚までに制限することにより、  
統計値と圧力分布エリアが正確に表示できるよう改良しました

動画のCSV保存

## 旧アプリ


動画を直接CSV保存

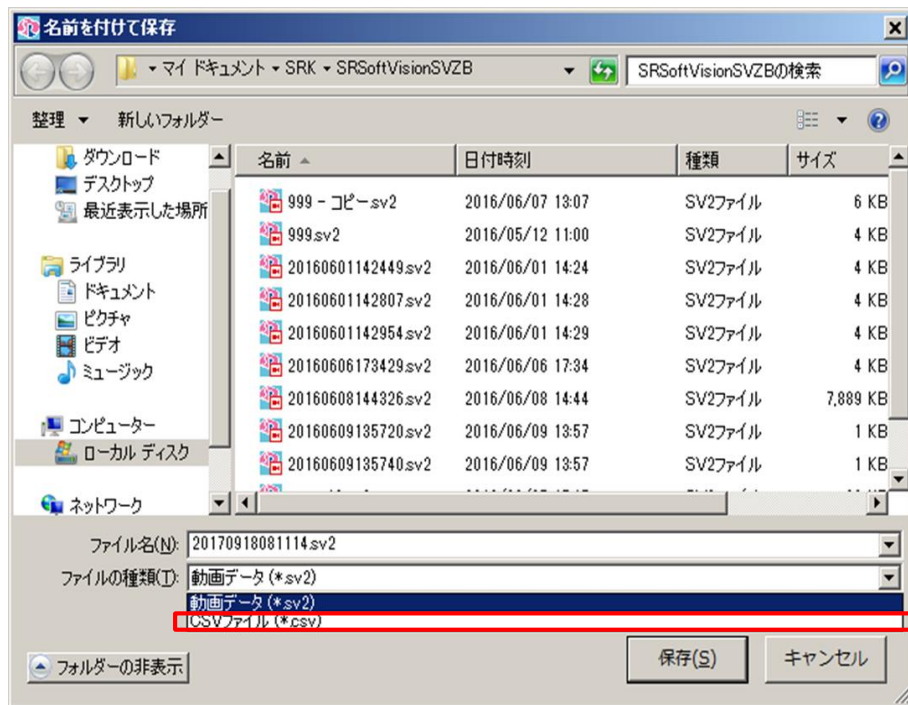

圧力分布画像を再度呼び出すことができない

## 新アプリ

録画データ(Sv2a.)を  
CSVコンバーターで変換

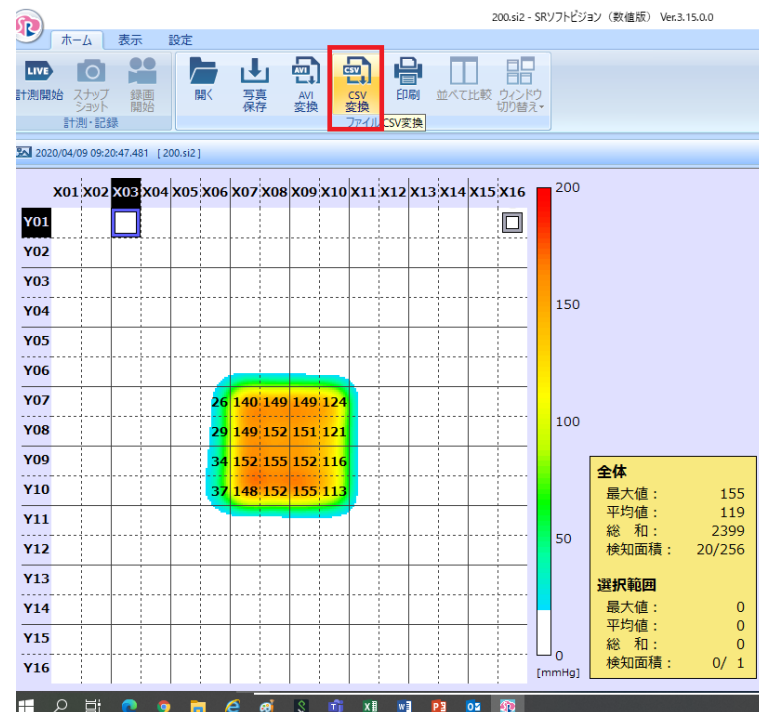


	旧アプリ	新アプリ
圧力単位	mmHg	mmHg ・ hpa (切替可)
	圧力単位の切替機能の追加	

旧アプリ

新アプリ

断面表示機能

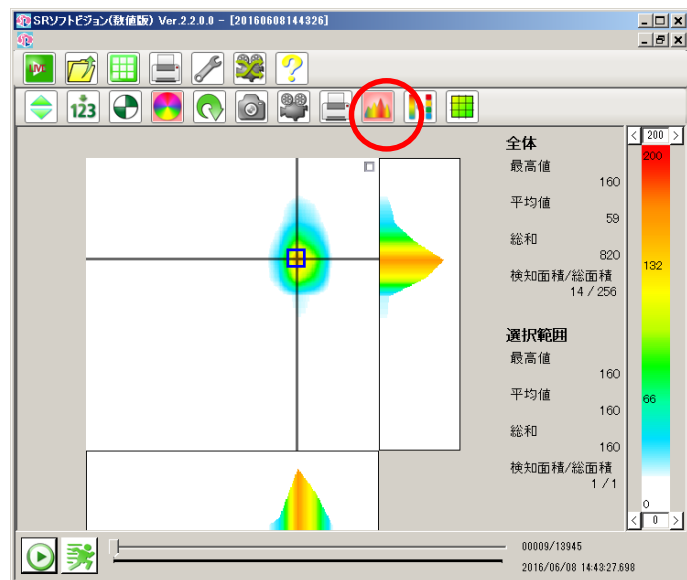

無し

旧アプリ

新アプリ

拡張子


si2、jpg、bmp

si2a、jpg


カラー  
スケール  
離散

旧アプリ

新アプリ

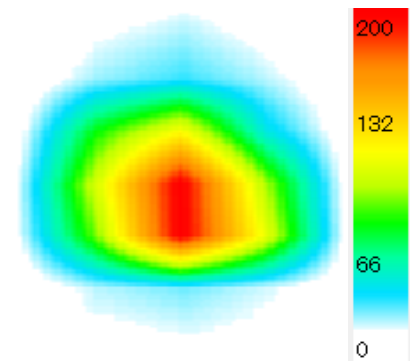

連続的 (デフォルト)

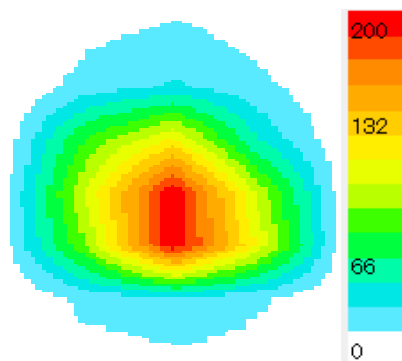

段階的

無し